

3M™ Impregum™ Super Quick Polyéterový otiskovací materiál

Zachytit každý detail za 2 minuty? Ano, je to možné.



Rychlé tuhnutí

S dobou tuhnutí pouhé dvě minuty nový Impregum Super Quick materiál umožňuje rychlejší otisky u méně složitých případů, jako jsou jednočlenné korunky, implantáty, inleje/onleje a menší můstky do 3 členů.



100% Polyéter - ověřená přesnost

Stejně jako všechny polyétery Impregum Super Quick materiál vykazuje vynikající výkon ve vlhkém prostředí a skvělou zatékavost, díky čemu získáte přesně padnoucí náhrady.



Komfort pro pacienty

Vylepšená svěží chuť spolu s krátkou dobou tuhnutí v ústech výrazně zvyšuje pohodlí vašich pacientů.




Polyéter a CAD/CAM

Impregum Super Quick je materiál, který je skenovatelný se současnou generací skenerů pro více efektivní práci.

3M™ Impregum™ Super Quick polyéterová otiskovací hmota

- První vysoce rychlý polyéter s pracovním časem 45 sekund a tuhnutím v ústech 2 minuty
- Dostupný v konzistenci heavy, medium a light body
- Pro monofázovou a jednokrokou techniku
- Ideální pro otisky 1-členných korunek, implantátů, inlají/onlají a menších můstků do 3 členů

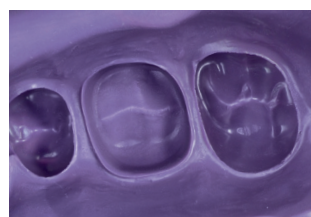

Rychlejší cesta u menších případů s přesností polyéterů.



	Dávkovací systém	Otiskovací technika	1-členná korunka	Implantát (≤ 2 členy)	Inlej/onlej (≤ 2 členy)	Mústek (≤ 3 členy)	Doporučený pracovní čas (min:sek)	Čas tuhnutí v ústech (min:sek)
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Medium Body)		Monofázová nebo 1-kroková	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Heavy Body)		1-kroková	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Super Quick (Light Body)		1-kroková	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00

3M™ Dual Arch otiskovací lžice

3M™ Adhezivum pro polyétery Contact Tray (modré)

NOVÉ

Zachyťte otisk horní, dolní čelisti i registraci skusu v jednom kroku. Ušetřete čas i materiál.



Jednoduchá aplikace a dobrá adheze po jedné minutě schnutí. Snadné odstranění adheziva z otiskovacích lžic.

NOVÉ



Objednací informace

Obj. č.	Informace o produktu
69386	Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Doplňkové balení 1 x báze à 300 ml, 1 x katalyzátor à 60 ml
69410	Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body Doplňkové balení 1 x báze à 300 ml, 1 x katalyzátor à 60 ml
69380	Impregum™ Super Quick Light Body Balení 2 ks krému à 50 ml, 5x Intra oral syringe fialová, 5x míchací kanyla fialová)
69384	Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Zaváděcí balení 1 x báze à 300 ml, 1 x katalyzátor à 60 ml, 10x Penta míchací kanyla červená, 1x elastomerní stříkačka, 1x adhezivum pro polyétery
69382	Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/ Light Body Zaváděcí balení 1 x báze à 300 ml, 1 x katalyzátor à 60 ml, 2 ks krému Light Body à 50 ml, 10x Penta míchací kanyla červená, 5x Intra oral syringe fialová, 5x míchací kanyla fialová, 5x aplikační koncovky bílé, 1x adhezivum pro polyétery
69416	Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body/ Light Body Zaváděcí balení 1 x báze à 300 ml, 1 x katalyzátor à 60 ml, 2 ks krému Light Body à 50 ml, 10x Penta míchací kanyla červená, 5x Intra oral syringe fialová, 5x míchací kanyla fialová, 5x aplikační koncovky bílé, 1x adhezivum pro polyétery
71454	Garant™ Míchací kanyly fialové Doplňkové balení 50 ks
69409	Polyéterové Contact Tray adhezivum Doplňkové balení 1 x lahvička à 17 ml
71622	Dual Arch otiskovací lžice posteriošní Doplňkové balení 48 ks
71623	Dual Arch Otiskovací lžice anteriorní Doplňkové balení 35 ks

Garant™ Míchací kanyly fialové



NOVÉ

3M

3M Oral Care Solution Division
3M Česko spol. s r.o.
V Parku 2343/24, 14800 Praha