


Díky optickým vlastnostem a vysoké opacitě Pink Opaquer poskytuje skvělé zakrytí kovu nebo tmavých skvrn na dentinu.



Maskovaná plocha

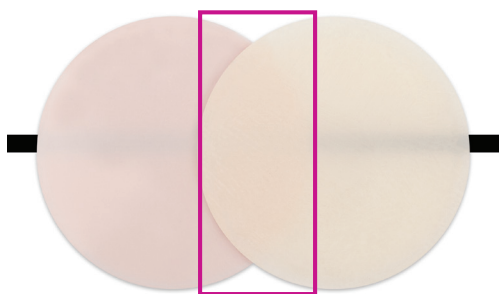

**Dostupný v tubě
a kompulích**

- 1 mm tlustý disk vytvořený z Pink Opaqueru (PO) byl umístěn přes černou čáru pro demonstraci schopnosti maskování
- Pro konečný výsledek byl na PO položen disk odstínu A1 o tloušťce 1 mm

Polymerační protokol pro Pink Opaquer

Informace pro objednání

Typ výplně	Hloubka inkrementu	Halogenové lampy (s výkonem 550 - 1,000 mW/cm ²)	LED lampy (s výkonem 1,000 - 2,000 mW/cm ²)
Všechny	1 mm	40 sek. okluzálně	20 sek. okluzálně

Kompule 6575PO 10 x 0,2 g
Tuby 6570PO 1 x 4 g

Ideální pro maskování vstupu do implantátu

**Ideální pro maskování tmavého dentinu
po amalgámové výplni**

