

**Výber
odtieňa
sa zrazu
zjednodušil.**

3M™ Filtek™ Easy Match Univerzálny kompozit

- ▶ Intuitívny výber odtieňa
- ▶ Prírodzene adaptívna opacita
- ▶ Nižšie skladové zásoby



3M™ Filtek™ Easy Match Univerzálny kompozit

Bright. Natural. Warm

Len 3 odtiene prinášajú
perfektné zladenie úsmevu
takmer každého pacienta

Čo môžete očakávať:

- ▶ Jednoduchší postup pri
jednoodtieňových rekonštrukciách
- ▶ Prirodzene vyzerajúce výsledky
- ▶ Zjednodušený systém
postavený na klinicky overenej
nanotechnológii
- ▶ Rýchly a intuitívny výber
odtieňa pri frontálnych
aj distálnych rekonštrukciách

Uľahčíte si výber odtieňa. Jednoducho. Intuitívne.

- ☒ Len 3 odtiene: Bright, Natural, Warm
- ☒ Žiadne komplikované farebné kľúče
- ☒ Nie je potrebný opákný materiál na
blokovanie svetla

Jednoduchosť bez kompromisu.

Niektoré zjednodušené systémy odtieňov prinášajú nevýhody
v estetike. Kompozit Filtek Easy Match Universal však
prináša nielen jednoduchý výber odtieňa ale aj perfektné
splynutie s okolitými tkanivami pre prirodzené vyzerajúce
úsmevy.



„3M™ Filtek™ Easy Match Universal
ponúka veľmi dobrý handling a páči sa mi
aj konzistencia materiálu pri aplikácii.
Estetika dokončenej práce je vynikajúca
a prispôsobenie odtieňov je skvelé ako
vo frontálnom tak aj v distálnom úseku.“

Dr. Kunal Shah
Hendon, Veľká Británia

Výber odtieňa je intuitívny a priamy.

Sýtosť, alebo intenzita farby, je len jedným z faktorov, ktorý vedie k vynikajúcej zhode odtieňa. Aj keď má kompozit „správnu farbu“ môže vyčnievať z okolitej dentície ak jeho **jas** (relatívna svetlosť/tmavosť) alebo **opacita** nie sú tiež vhodne zladené.

3 odtiene kompozitu 3M™ Filtek™ Easy Match pokrývajú všetky odtiene VITA Classical - nie je potrebný žiadny opakný materiál na blokovanie prieniku svetla.

Nemôžem byť šťastnejší so schopnosti kompozitu 3M™ Filtek™ Easy Match splynúť s okolitými tkanivami. Výber odtieňa je teraz jednoduchší ako kedykoľvek predtým. Handling mi veľmi pasuje a pekný lesk sa dá dosiahnuť len s použitím overeného leštiaceho systému Sof-Lex.“

Dr Nik Arolker
Derby, UK

Bright


Reprezentatívny príklad odtieňa Bright.



Bright: nízka sýtosť, vysoký jas

Natural

Reprezentatívny príklad odtieňa Natural.

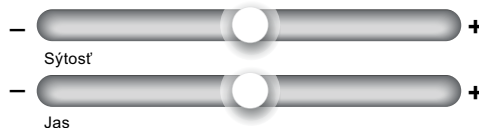

Natural: vyvážená, stredná sýtosť a jas

Warm

Reprezentatívny príklad odtieňa Warm.



Warm: vysoká sýtosť, nízky jas

Primárne výhody, ktoré si zamilujete

- Vynikajúca zhoda odtieňa vo väčšine anteriórnych a posteriórnych rekonštrukcií
- Rýchly, jednoduchý a intuitívny výber odtieňa bez obetovania opacity
- Zjednodušené jednovrstvové rekonštrukcie, kde nie je potrebný žiadny opaker na blokovanie prieniku svetla
- Zjednodušený systém správy zásob redukuje plytvanie pri málo používaných odtieňoch
- Pohodlné spracovanie
- Vhodný na nahrievanie, čo znižuje silu potrebnú na vytlačanie¹ bez zmeny fyzikálnych vlastností²



S láskavým dovolením Dr. Briana Baliwasa

1. Interné dáta.


2. Ak je nahrievaný podľa návodu na použitie (kapsule: max. 70°C do 1 hodiny).

Ako to funguje?

So silou prirodzene prispôsobivej opacity.


Na rozdiel od iných jednodotieňových systémov kompozit 3M™ Filtek™ Easy Match nepotrebuje maskovací materiál na prekrytie tmavých miest pri anteriórnych rekonštrukciách. Jeho prirodzene prispôsobivá opacita zabezpečuje translucenciu podobnú sklovine v hrúbkach 0,5 - 1 mm a to presne tam kde ju potrebujete pri zošíkmeniach a incizálnych hranách. Pri hrúbke väčšej ako 2 mm všade inde má opacitu podobnú dentínu.

Všetky kompozity sú viac translucetné, keď sú aplikované v tenších vrstvách. Ale prirodzene prispôsobivá opacita kompozitu Filtek Easy Match optimálne imituje dentín aj sklovinu, čo napomáha splynutiu s okolitými zubnými tkanivami a zabezpečuje prirodzený vzhľad.

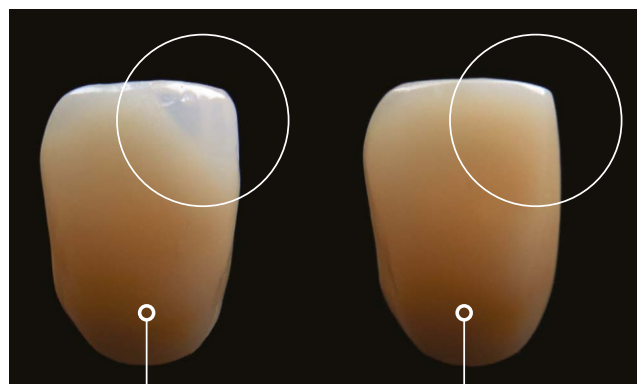

Výrobca A
jeden odtieň
(bez použitia opákeho
maskovacieho materiálu)

3M™ Filtek™ Easy Match
univerzálny kompozit odtieň
Natural (bez použitia
opákeho maskovacieho
materiálu)

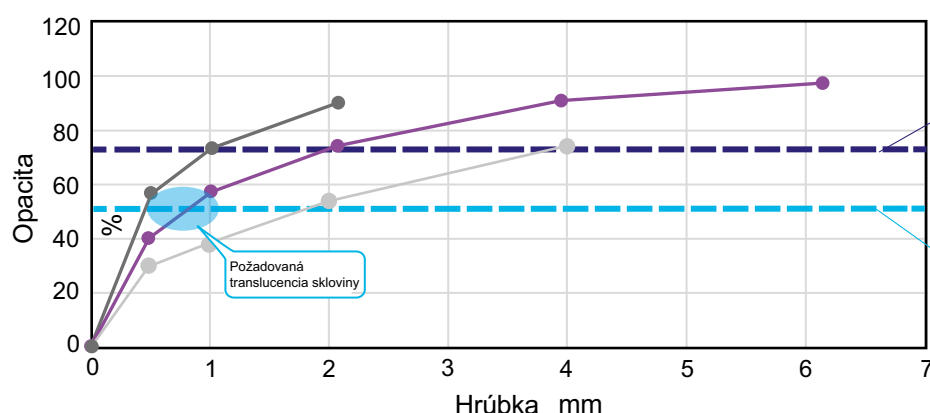

Jas dentín
3M™ Filtek™ Easy Match má
opacitu dentínu
v hrúbke ≥ 2 mm


Jas sklovina
3M™ Filtek™ Easy Match má
translucenciu skloviny
v hrúbke 0.5–1 mm

Zdroj: Interné dáta 3M


— 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Restorative A2-D — Konkurent A jeden odtieň (bez maskovacieho opákeho materiálu)
— 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative

Bližší pohľad na SKUTOČNÚ nanotechnológiu

Kompozit Filtek Easy Match má tú istú SKUTOČNÚ technológiu nanočastíc plniva ako aj ostatné prémiové kompozitné materiály Filtek. Unikátne zhluky nanočastíc zabezpečujú excelentnú odolnosť voči opotrebovaniu a pomáhajú udržiavať vysoký lesk.

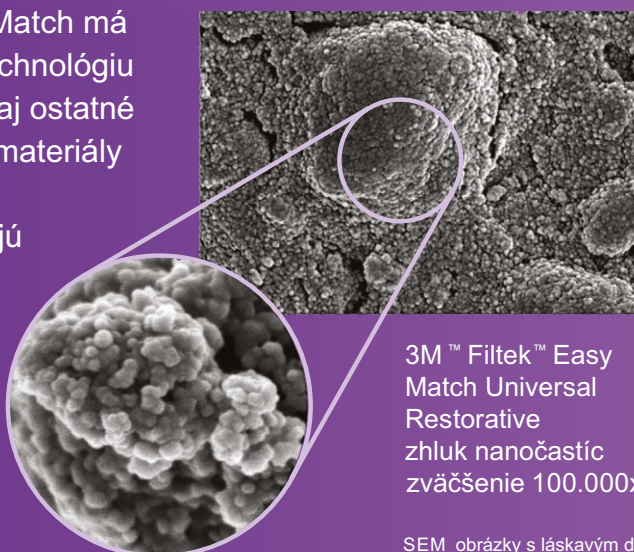

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative
zhluk nanočastíc
zväčšenie 100.000x

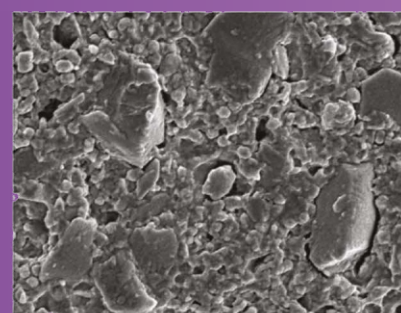

Kompozit iného výrobcu

SEM obrázky s láskavým dovolením Dr. J. Perdigao, University of Minnesota.

Súčasť rodiny dentálnych materiálov 3M™ Filtek™

Budovanie dôvery
už viac ako 50 rokov.
2 miliardy rekonštrukcií
– a pribúdajú ďalšie.

Kompozity 3M Filtek postavené na našej SKUTOČNEJ nanotechnológii pomohli zubným lekárom pri zhotovení 2 miliárd rekonštrukcií. Rodina Filtek Vám dáva možnosti, ktoré potrebujete pre všetky klinické situácie: od anteriórnych po posteriórne rekonštrukcie, od prémiovej estetiky po časovo úsporné riešenia ako aj všetko medzi tým. Bez ohľadu na to, či potrebujete univerzálny, flow alebo bulk-fill kompozit v prednom alebo zadnom úseku rodina Filtek Vám vždy ponúka estetické a efektívne riešenie.



Kompozit 3M™ Filtek™ Easy Match predčil moje očakávania. Jeho schopnosť farebne splynúť je pozoruhodná. Len s 3 odtieňmi viem napodobniť prakticky každý existujúci odtieň, vďaka čomu je proces výberu farby neuveriteľne jednoduchý.

Dr. P. Monteiro
Instituto Universitário Egas Moniz, Taliansko



Vynikajúca
lešiteľnosť



Excelentná pevnosť
a odolnosť voči
opotrebovaniu



Dobrý
handling



Vhodný na nahrievanie
a injekčnú techniku¹

1. Nahrievanie kapsúl: max. 70°C max. 1 hodinu).



3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative – Bright

Obj. č. Popis produktu

6310B 20 kapsulí á 0,20g

6320B 1 striekačka á 4g



3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative – Natural

Obj. č. Popis produktu

6310N 20 kapsulí á 0.20g

6320N 1 striekačka á 4g



3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative – Warm

Obj. č. Popis produktu

6310W 20 kapsulí á 0.20g

6320W 1 striekačka á 4g

Obj. č. Popis produktu

6310K 60 kapsulí á 0,20g: po 20 kapsulí Bright, Natural a Warm

6320K 3 striekačky á 4g: 1 striekačka z odtieňa Bright, Natural, and Warm

Obj. č. Popis produktu

6310 100 kapsulí á 0.20g: len odtieň Natural

6320 5 striekačiek á 4g: len odtieň Natural



[https://www.solventum.com/en-us/
home/oral-care/dental-solutions/
direct-procedure/](https://www.solventum.com/en-us/home/oral-care/dental-solutions/direct-procedure/)

Záruka: Spoločnosť 3M zaručuje, že tento výrobok bude v čase kúpy bez väd materiálu a väd z výroby. 3M NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY, VRÁTANE IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATEĽNOSŤ ALEBO VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku pre jeho aplikáciu. Ak je tento výrobok počas záručnej doby vadný, vašou jedinou náhradou a jedinou povinnosťou spoločnosti 3M bude oprava alebo výmena výrobku 3M.

Obmedzenie zodpovednosti: Okrem prípadov, kde to zákon zakazuje, spoločnosť 3M nezodpovedá za akúkoľvek stratu alebo škodu vzniknutú v dôsledku tohto výrobku, či už priamo, nepriamo, špeciálne, náhodne alebo následne, bez ohľadu na tvrdenú teóriu, vrátane záruky, zmluvy, nedbanlivosti alebo prísnej zodpovednosti.



Kontakty:

 solventum | Authorized Distributor

* Zdroj: Interné data 3M.

Lot #098E53, #002EY8; Filtek™ Easy Match Universal Restorative Lot #9533695, #NE57998.

@Solventum 2024. Solventum, logo S a Filtek sú ochranné známky spoločnosti Solventum alebo jej pridružených spoločností. 3M a 3M logo sú ochranné známky 3M.

Ostatné použité ochranné známky sú vlastníctvom iných spoločností.