

Riešenia pre preventívnu starostlivosť

Clinpro™

Pohodlná starostlivosť o ústnu dutinu



Koncept zdravého úsmevu

Prášok Clinpro™ Prophyl

Pasta Clinpro™ Prophyl

3M ESPE

- Systematická prevencia s kompletným programom výrobkov
- Na čele vedeckého pokroku
- S príjemnou chuťou
- Jednoduché použitie
- Správny výrobok pre každú fázu liečby


Premyslený, komplexný systém prevencie.

Pohodlná starostlivosť o ústnu dutinu je iniciatíva, ktorá systematicky vychádza v ústrety Vám a Vaším pacientom v preventívnej zubnej starostlivosti.

Pod názvom **Clinpro™** vyvinula spoločnosť **3M ESPE** program výrobkov, ktorý spája profesionálne čistenie zubov (**PČZ**) a starostlivosť o ústnu dutinu. Tieto výrobky sú založené na najnovších výsledkoch vedeckého výskumu. Ľahko a príjemne sa používajú a poskytujú spoľahlivú ochranu pre zuby a ďasná. **Ďalšia výhoda: majú výbornú chuť!**

PČZ+: Váš program efektívnej prevencie.

Profesionálne čistenie zubov je potrebné prispôbiť jednotlivcovi a závisí od stavu ústnej dutiny každého pacienta. Bez ohľadu na to, aké špecifické opatrenia uskutočnite, séria Clinpro od spoločnosti 3M ESPE ponúka správne výrobky pre príjemné, jednoduché a bezproblémové ošetrovanie.

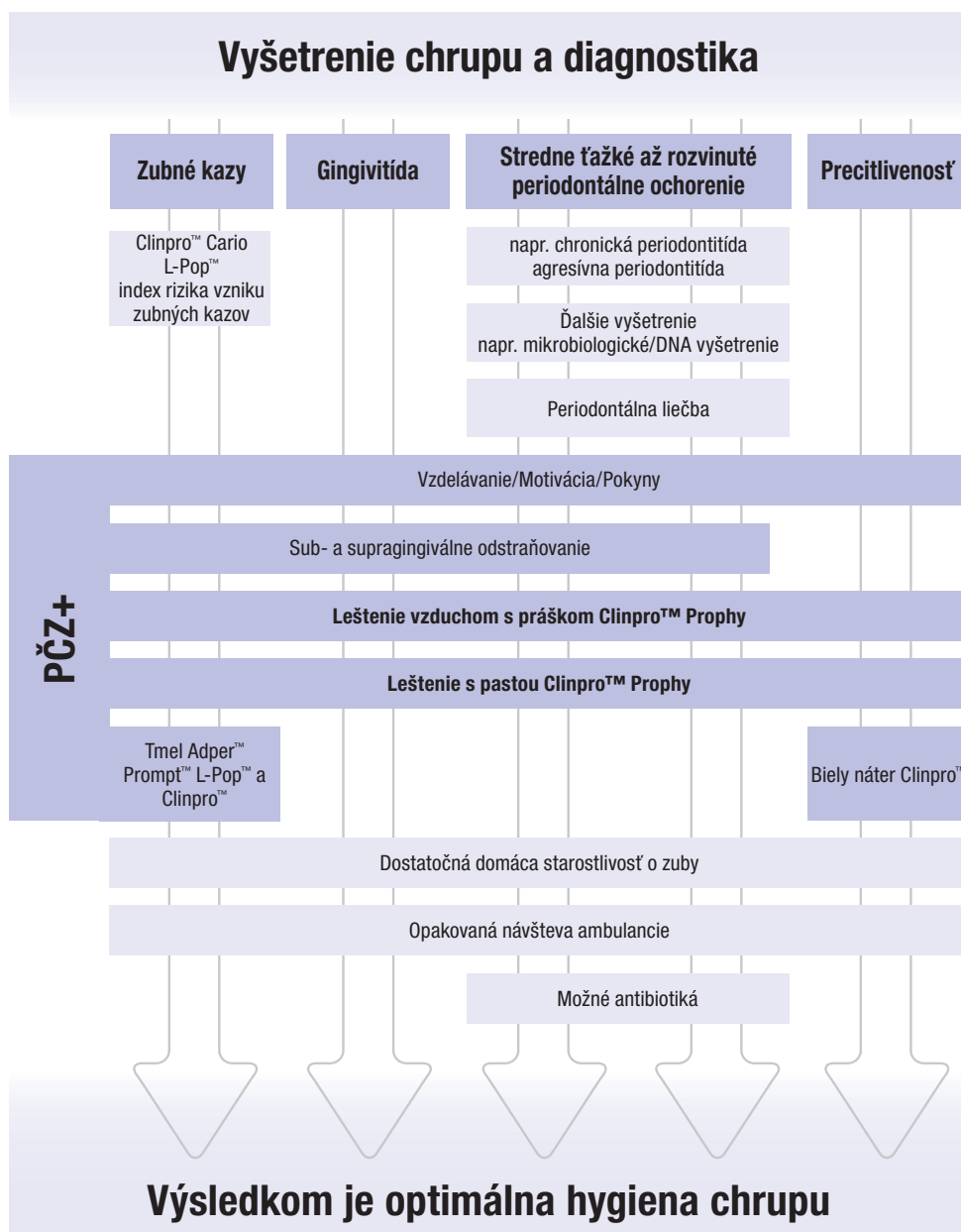

Prášok Clinpro™ Prophy: na sub- a supragingiválne použitie.

Na bezpečné a účinné odstránenie povlaku.

Prášok Clinpro Prophy predstavuje jedinečné zlepšenie technológie leštenia vzduchom a periodontálnej liečby. Je pohodlnejšie ako manuálne postupy, umožňuje bezpečné odstraňovanie subgingiválneho povlaku a vďaka jeho minimálnej abrazivite je jemný k zubnej sklovine, materiálom zubných náhrad a výplní (ako sú zlato, iné kovy, kompozitné materiály) a mäkkým povrchom koreňov a zabraňuje strate hmoty. Navyše prášok Clinpro Prophy odstraňuje patogénne baktérie v periodontálnych vačkách účinnejšie ako konvenčné postupy odstraňovania povlaku.

Povlak na sub- a supragingiválnych povrchoch zubov sa mechanicky odstráni pomocou prášku Clinpro Prophy – či už pri bežnom profesionálnom čistení zubov alebo ako doplnok k subgingiválnemu odstraňovaniu na začiatku periodontálnej liečby. Slabé až stredne silné vonkajšie škvrny (napr. od tabaku, červeného vína a pod.) je taktiež možné bezpečne a jednoducho odstrániť použitím prášku Clinpro Prophy.



1. Zdravé periodoncium

2. Gingivitída

3. Periodontitída

Prášok Clinpro™ Prophy odstraňuje povlak dokonca aj v hlbších vačkách.

Prášok Clinpro Prophy môžete použiť počas podpornej periodontálnej liečby pri opakovanej návšteve ambulancie. Aby ste udržali periodontálnu oblasť zdravú, odporúčame vykonávať profesionálne čistenie zubov – v závislosti od zdravotného stavu zubov – každých tri až šesť mesiacov. Prášok Clinpro Prophy čistí tak jemne, že je ho možné, na rozdiel od tradičných práškov, používať často. Vďaka tomu je to taktiež výborná voľba pre PČZ pacientov so strojčekom na zuby.

- Bezpečné odstránenie aj subgingiválneho povlaku
- Jedinečné vylepšenie
- Optimálne pohodlie pri použití
- Účinné zníženie počtu baktérií v periodontálnych vačkách
- Jednoduché a bezpečné odstránenie vonkajších škvŕn




- Výrazné zníženie prítomnosti baktérií
- Zmenšenie hĺbky váčkov porovnateľné s ručným postupom
- Vysoká spokojnosť pacientov s pohodlím a chuťou
- Silná motivácia pre pravidelnú prevenciu

Klinické výsledky: celková vyššia kvalita.

Zníženie prítomnosti baktérií


Výsledkom leštenia vzduchom použitím prášku Clinpro™ Prophy je značné zníženie prítomnosti baktérií v porovnaní s ručným odstraňovaním povlaku.

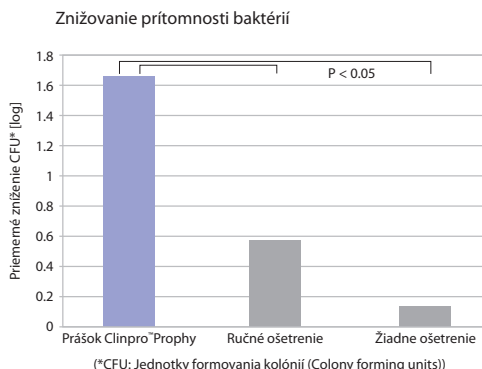

Petersilka G., Tunkel J., Barakos K., Heinecke A., Häberlein I., Flemmig T.F.: Subgingival plaque removal at interdental sites using a low abrasive air-polishing powder, Journal of Periodontology, 2003, Volume 74, Number 3

Zmenšenie hĺbky váčkov


Zmenšenie hĺbky váčkov pri použití prášku Clinpro™ Prophy je porovnateľné s tradičnými postupmi ošetrovania. Metóda leštenia vzduchom použitím výrobkov Clinpro™ má svoje výhody: je rýchlejšia, príjemnejšia pre pacienta a dochádza k menšiemu obrušovaniu povrchov koreňov.

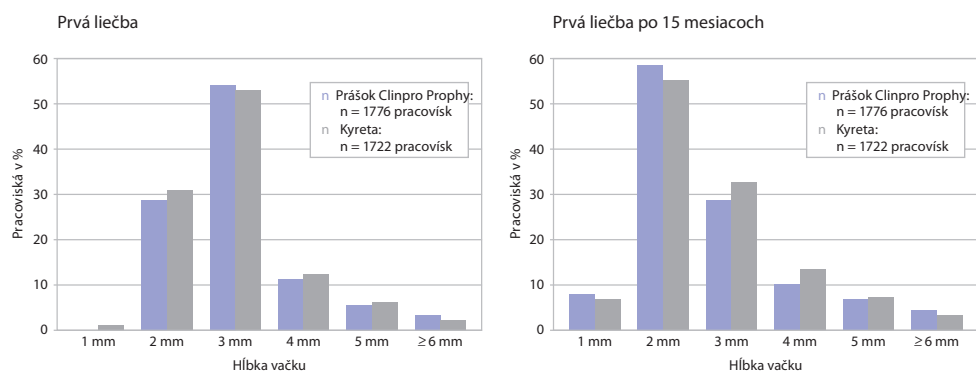

Petersilka G., Tunkel J., Barakos K., Heinecke A., Häberlein I., Flemmig T.F.: Subgingival plaque removal at interdental sites using a low abrasive air-polishing powder, Journal of Periodontology, 2003, Volume 74, Number 3

Pohodlie a uspokojenie pacienta

Vyhodnotenie priaznivého prijatia prášku Clinpro™ Prophy v piatich zubných ambulanciách s celkovým počtom 81 pacientov bolo presvedčivé.

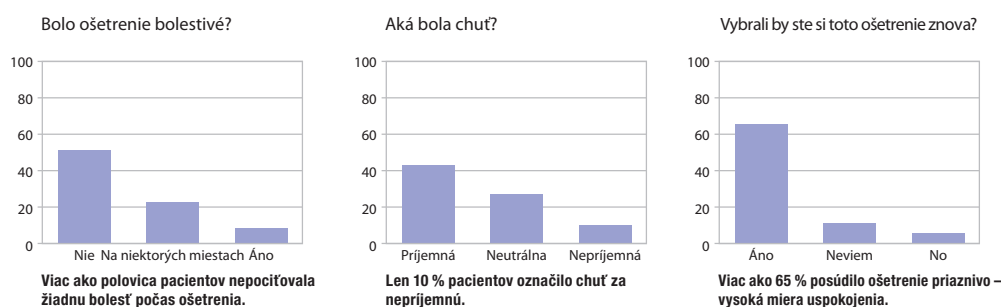

Menšie obrusovanie – maximálne zachovanie zubnej hmoty.

Pre šetrné čistenie zubov

V porovnaní s tradičným práškom hydrogenuhličitanu sodného/vápenatého obrusuje prášok Clinpro™ Prophy povrchy skloviny a dentínu vo výrazne menšej miere. Povlak sa odstraňuje bezpečne bez straty hmoty, dokonca aj z povrchov koreňov. Vďaka tejto úrovni abrazivity je možné prášok Clinpro Prophy použiť častejšie ako dvakrát ročne – čo je kontraindikované u iných vzduchom leštiacich práškov.

Tradičný

Subgingiválne použite: ---

Odstránenie povlaku: +++

Odstránenie škvŕn: +++

Použitie na sklovine: ++

Použitie na dentíne: ---

Použitie na povrchu koreňov: ---

Nízko abrazívny (Prášok Clinpro™ Prophy)

Subgingiválne použite: +++

Odstránenie povlaku: +++


Odstránenie škvŕn: ++

Použitie na sklovine: +++

Použitie na dentíne: +++

Použitie na povrchu koreňov: +++

- Minimálne obrusovanie povrchov skloviny a dentínu
- Žiadna klinicky relevantná strata hmoty z povrchov koreňov
- Možné použitie častejšie ako dvakrát ročne
- Výrazne kratší čas ošetrovania v porovnaní s ručnými postupmi

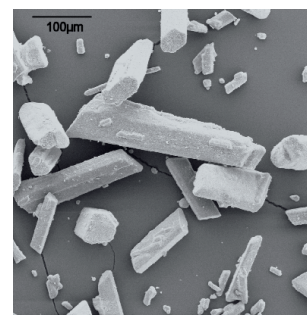


Tradičné vzduchom leštiace prášky

- častice s veľkosťou do 200 μm
- určené na použitie len raz, maximálne dvakrát ročne z dôvodu abrazivity

Spôsob používania prášku Clinpro™ Prophy.

Pohodlné, bezpečné, rýchle a s príjemnou chuťou.


Odstraňovanie povlaku s práškom Clinpro Prophy nie je len účinnejšie ako pri použití ručných postupov, ale aj rýchlejšie. Pacienti taktiež oceňujú výnimočne príjemnú chuť. Na obrázkoch je zobrazený podrobný postup. V porovnaní s tradičným čistením použitím kyrety potrebujete len štvrtinu času na dosiahnutie lepších výsledkov. Navyše je prášok Clinpro Prophy ideálny na rýchle a účinné čistenie zubov, dokonca aj v tesnej blízkosti zubných strojčekov.

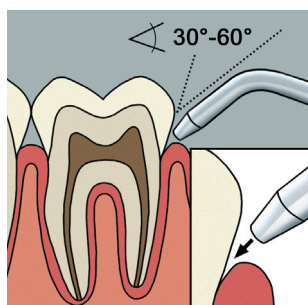

Umiestnenie trysky 5 mm od ďasien v uhle od 30° do 60°.



Pred a po leštení použitím prášku Clinpro™ Prophy. Táto metóda je štvornásobne rýchlejšia a jednoduchšia ako tradičné postupy s použitím kyriet.

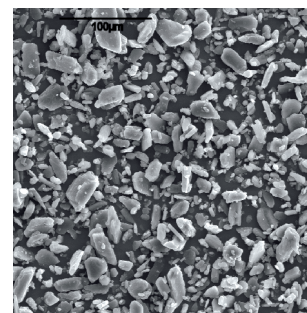

Prášok Clinpro™ Prophy (NOVINKA!)

- priemerná veľkosť častice < 45 μm
- možné použitie tak často, ako je to potrebné

Dva výrobky s vynikajúcimi vlastnosťami.

Prášok Clinpro™ Propy

Výhody pre zubárov a dentálnych hygienikov.

Prášok Clinpro Propy umožňuje rýchlejšie, ľahšie a účinnejšie profesionálne čistenie zubov.

- Je možné ho použiť na odstránenie **sub- a supragingiválneho povlaku a škvŕn počas bežného profesionálneho čistenia zubov, počiatočnej periodontálnej liečby a v periodontálnej starostlivosti, pri opakovanej návšteve ambulancie.**
- **Menšie poškodenie skloviny a dentínu zuba ako pri použití tradičných práškov hydrogenuhličitanu sodného/vápenatého.**
- Veľmi nízka abrazivita umožní použitie častejšie ako dvakrát ročne (kontraindikácia u iných vzduchom leštiacich práškov).
- **Účinnejší pri znižovaní bakteriálnych nánosov v periodontálnych vankoch ako pri použití tradičných postupov.**
- Štvornásobne rýchlejšia procedúra ako pri tradičných postupoch.
- Menej technicky náročná procedúra ako pri použití tradičných kyriet (lepšia ergonómia).
- **Dobré meno súvisiace s poskytovaním inovatívnej a vylepšenej starostlivosti o pacienta.**
- Zlepšuje dodržanie opakovanej návštevy ambulancie zo strany pacienta.

Výhody pre pacienta.

S práškom Clinpro™ Propy už nebude odstraňovanie povlaku nevyhnutným zlom. Odteraz pôjde o pohodlnú procedúru s príjemnou chuťou.

- **Bezpečné odstránenie povlaku z povrchov (koreňa) bez klinicky relevantnej straty hmoty (koreňa).**
- Bezpečné použitie pri zubných strojčekoch bez ich poškodenia.
- **Rýchle ošetrenie.**
- Štvornásobne rýchlejšia procedúra ako pri tradičných postupoch.
- **Účinnejší pri znižovaní bakteriálnych nánosov v periodontálnych vankoch ako pri použití tradičných postupov.**
- **Menej bolestivá procedúra lepšie prijímaná pacientmi.**
- Príjemná chuť nezanecháva slanú pieskovitú chuť v ústach pacienta.
- Pohodlnejšia a jemnejšia procedúra ako pri použití tradičných kyriet.





Pasta Clinpro™ Propphy

Táto leštiaca pasta je navrhnutá na používanie spolu s práškom Clinpro™ Propphy v klinickej praxi a zlepšuje odstránenie vonkajších škvŕn.

Prášok Clinpro Propphy je mierne abrazívny, takže nemusí dôjsť k odstráneniu silných vonkajších škvŕn (spôsobených častým fajčením, kávou, čajom a pod.). Na odstránenie silných škvŕn ponúka rad výrobkov Clinpro pastu Clinpro Propphy, doplnkový výrobok na domáce čistenie chrupu.

Pasta Clinpro Propphy obsahuje pemzu a dodáva sa v troch rôznych zrnitostiach – jemná, stredná a hrubá – takže dentálny hygienik môže v každej situácii zvoliť správnu zrnitosť na optimálne čistenie a obrusovanie. Okrem toho pasta Clinpro Propphy uvoľňuje fluorid, čo zlepšuje pevnosť zubov a znižuje ich citlivosť. Tak ako prášok Clinpro Propphy aj pasta Clinpro Propphy má skvelú chuť.

- Špeciálne zloženie pasty znižujúce **striekanie** počas leštenia.
- Prášok Clinpro Propphy je možné skombinovať s pastou Clinpro Propphy s cieľom odstrániť odolné vonkajšie škvŕny.
- Počas leštenia dochádza k uvoľňovaniu fluoridu.
- **3 rôzne zrnitosti: jemná, stredná a hrubá pre správny výber na obrusovanie.**
- 2 príchute: mäťová a čerešňová.
- **Jednotkové balenie dávky** je sterilné a ľahko použiteľné.



Objednávacie údaje



Prášok Clinpro™ Propphy



Pasta Clinpro™ Propphy

Č. položky	Informácie o výrobku
------------	----------------------

67001	Prášok Clinpro™ Propphy 4 fľaše á 100 g
-------	---

12613	Pasta Clinpro™ Propphy 200 á 2 g jemnozrnná s príchuťou čerešne
-------	---

12657	Pasta Clinpro™ Propphy 200 á 2 g strednozrnná s mäťovou príchuťou
-------	---

12658	Pasta Clinpro™ Propphy 200 á 2 g hrubozrnná s mäťovou príchuťou
-------	---

3M ESPE

3M (East) AG
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
Tel.: 02/49 105 211
Fax.: 02/44 454 476
E-Mail: innovation.sk@mmm.com
Internet: www.3m.sk

Ty + 3M ESPE =
nové nápady pre zubárov

3M, ESPE, Adper, Clinpro, L-Pop
a Prompt sú ochranné známky spoločnosti
3M alebo 3M ESPE AG.

© 3M 2008. Všetky práva vyhradené.
01 (7.2008)